

1. Popis produktu

Regeneračná čiapka s LED terapiou je zariadenie na liečbu vypadávania vlasov a podporu ich rastu. Hlavným účelom je bezbolestná stimulácia oslabených vlasových folikulov, čím sa posilňuje ich rastová vitalita a podporuje zdravý rast vlasov. Zariadenie využíva infračervené svetlo s vlnovou dĺžkou 850 nm a červené svetlo s vlnovou dĺžkou 660 nm.

2. Indikácie na použitie

Regeneračná čiapka s LED terapiou je špeciálne navrhnutá na liečbu rednutia vlasov a plešatenia, pomáha zvrátiť a predchádzať vypadávaniu vlasov a stimuluje ich

3. Kontraindikácie

1. Používanie tohto produktu je zakázané pacientom s nasledujúcimi ochoreniami alebo príznakmi: metastatické nádory, vysoká horúčka, obliterujúca vaskulitída, očné ochorenia, malígne nádory, vaskulárna kompenzačná nedostatočnosť, aktívna tuberkulóza, akútne infekcie mäkkých tkanív, tehotenstvo, sklon ku krvácaniu, poruchy kožnej citlivosti a kožné alergie.
2. Osoby s akútnym poranením v priebehu posledných 72 hodín nesmú zariadenie používať.
3. Používanie je zakázané pacientom s kardiostimulátormi, defibrilátormi alebo inými elektronickými implantátmi.
4. Zariadenie nepoužívajte, ak máte citlivú pokožku na svetlo alebo užívate lieky, ktoré môžu spôsobiť precitlivenosť na svetlo. Môže to viesť k fotosenzitívnej reakcii. Ak pocítite precitlivenosť, okamžite prestaňte používať.
5. Pred použitím zariadenia sa poraďte s lekárom, ak užívate alebo máte podozrenie, že užívate lieky spôsobujúce citlivosť na svetlo.

4. Upozornenia

1. Toto zariadenie nesmú používať spiace, v bezvedomí alebo intoxikované osoby.
2. Toto zariadenie nesmú používať osoby s necitlivosťou pokožky spôsobenou liekmi alebo inými faktormi.
3. Regeneračná čiapka s LED terapiou je elektrické zariadenie. Aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom:
 - Nestúpajte na zariadenie.
 - Neumývajte elektrické časti vodou.
 - Nedotýkajte sa zástrčky ani zariadenia mokrými rukami.
 - Nepoužívajte, ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená.
 - Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodené, roztrhnuté alebo prišlo do kontaktu s vodou.
 - Neťahajte, nezdvíhajte ani nenoste zariadenie za napájací kábel.
 - Nepoužívajte kábel ako rukoväť, neťahajte ho po ostrých hranách alebo rohoch.
 - Nepoužívajte v blízkosti horúcich povrchov.
 - Neohýbajte ani neskladajte zariadenie.
 - Na uskladnenie používajte originálne balenie, aby ste predišli možnému pokrčeniu alebo poškodeniu.
1. Nedovoľte deťom používať toto zariadenie – nie je to hračka.
2. Nepoužívajte zariadenie na otvorené rany, pretože teplo môže zvýšiť krvný obeh a spôsobiť krvácanie.
3. Tento produkt obsahuje neoprén. Ak ste na neoprén alergickí, pred použitím sa poraďte s lekárom.
4. Nepoužívajte s masťami, balzami alebo masážnymi prípravkami obsahujúcimi zložky vytvárajúce teplo, pretože to môže spôsobiť popálenie pokožky.
5. Počas používania neprikrývajte zariadenie žiadnymi predmetmi.

5. Varovanie

1. Pred použitím sa poraďte so svojím lekárom, najmä ak:
 - Ste tehotná.
 - Máte akékoľvek podozrivé alebo rakovinové lézie.
2. Pred použitím si prečítajte všetky pokyny a bezpečnostné opatrenia.
3. Nepoužívať u dojčiat.
4. Ak pocítite nepohodlie, okamžite prestaňte používať a kontaktujte svojho lekára.
5. Používajte len dodaný napájací zdroj.

6. Keď zariadenie nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky, aby ste predišli nebezpečenstvu zakopnutia.


7. Neodpájajte zástrčku ťahaním za kábel. Pri odpájaní zo zásuvky uchopte samotnú zástrčku, nie kábel.

8. Neprekračujte 20 minút používania na jednej ploche na jedno terapeutické sedenie.

9. V zriedkavých prípadoch sú ľudia citliví na svetlo alebo teplo. Každá osoba, ktorá toto zariadenie používa prvýkrát, by ho mala používať iba 5 minút na každú oblasť, na ktorú je aplikované. Ak máte akúkoľvek bolesť alebo nepohodlie, okamžite prestaňte. Ak nie, opakujte 5-minútovú terapiu počas prvých 3 dní. Po 3 dňoch, ak nie sú žiadne negatívne účinky, predĺžte čas na 10 minút pre každú oblasť počas nasledujúcich 3 dní. Zvýšte čas na 15 minút pre každú oblasť na ďalšie dni. Ak stále nepocítujete bolesť alebo nepohodlie, zvýšte na plný čas terapie – 20 minút na oblasť.

6. Details produktu

Regeneračná čiapka s LED terapiou je dodávaná kompletne zmontovaná a pripravená na použitie.

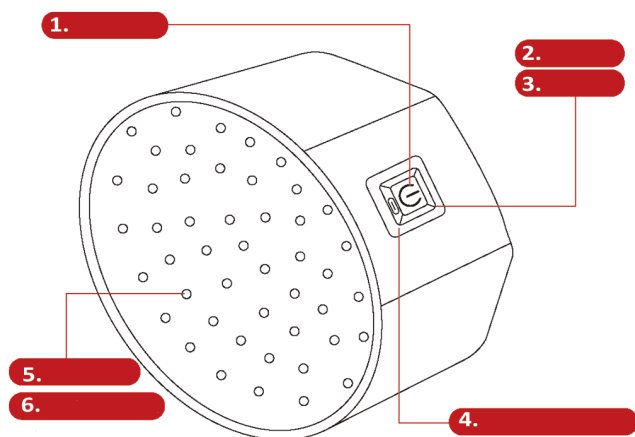

1. Indikátor napájania 2. Tlačidlo napájania 3. Režim 4. Tlačidlo napájania 5. 660 nm červené svetlo 6. 850 nm blízke infračervené svetlo

Balenie obsahuje:

- Regeneračná čiapka s LED terapiou
- USB napájací kábel
- Používateľská príručka

7. Citlivosť na svetlo

Pred začatím liečby otestujte svoju pokožku na citlivosť na svetlo nasledovne:

1. Zapnite zariadenie.
2. Priložte zariadenie na štvrtinu plochy predlaktia na 3 minúty.
3. Po 3 minútach skontrolujte oblasť:

- **Ak sa pokožka začervenala a začervenanie pretrváva viac ako 2 hodiny, vaša pokožka je citlivá na svetlo.**
- **V takom prípade zariadenie nepoužívajte a prestaňte ho používať.**

8. Použitie

- Nasadte si regeneračnú čiapku s LED terapiou.
- Zasuňte napájací kábel do zariadenia a zapojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky.
- Stlačte a podržte tlačidlo napájania na zapnutie zariadenia. Potom stlačte tlačidlo napájania, aby ste prešli medzi programami:
- **Pevné svetlo**-kontrolka svieti **na červeno**. Červené svetlo a infračervené (IR) svetlo pracujú súčasne, prenikajú hlboko do pokožky hlavy, stimulujú krvný obeh vo vlasových folikuloch, zlepšujú bunkový metabolizmus, podporujú zdravie vlasov a

zvyšujú hustotu a kvalitu vlasov.

- **Pulzujúce svetlo (10 Hz)**- kontrolka svieti **na zeleno**. Blikanie 10-krát za sekundu zvyšuje hladinu dopamínu v mozgu, zlepšuje náladu a kognitívne schopnosti.
- **Pulzujúce svetlo (40 Hz)**- kontrolka svieti **na modro**. Blikanie 40-krát za sekundu stimuluje mozgovú kôru, urýchľuje metabolizmus, podporuje fotobiologickú reguláciu a prispieva k zdraviu vlasov.
- Vidíte iba červené LED diódy: ostatné sú v infračervenom svetelnom spektre, ktoré nie sú viditeľné pre ľudské oko.
- Doba liečby je 20 minút, zariadenie sa automaticky vypne po 20 minútach. Zariadenie môže byť použité viackrát denne.
- Ak chcete zariadenie vypnúť kedykoľvek, stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia

9. Technické špecifikácie

- Všetky nastavenia sú nastavené na tovarenské.
- Regeneračná čiapka s LED terapiou nie je určená na opravu používateľom.
- Prevádzková teplota: 0°C až +27°C
- Relatívna vlhkosť: 85%
- Teplotný rozsah pre skladovanie: -30°C až +55°C
- Vlnové dĺžky:
- Infračervené LED: 850 nm
- Červené LED: 660 nm
- Napájanie: 5V 2A

10. Pokyny na čistenie

Čistite LED diódy raz mesačne pomocou liehu a bavlnenej handričky.

Pred aplikovaním liehu nechajte systém vychladnúť. Po nanosení liehu nechajte alkohol vyschnúť pred použitím zariadenia.

11. Často kladené otázky (FAQ)

Ako dlho trvá, kým uvidím výsledky?

Majte na pamäti, že rast vlasov si vyžaduje čas. Výsledky nebudete vidieť okamžite, pretože obnova zdravia folikulov a rast nových vlasov si vyžaduje čas. Môže to trvať najmenej 16 týždňov pravidelného používania, aby ste začali vidieť rast vlasov.

Musím niekedy vymeniť LED diódy?

LED diódy sú navrhnuté tak, aby vydržali roky pre priemerného používateľa.

12. Zrieknutie sa zodpovednosti

- Tento produkt nie je určený na diagnostiku, liečbu alebo prevenciu chorôb. Spoločnosť nepredstavuje žiadne tvrdenia, vyjadrenia ani záruky týkajúce sa schopnosti tohto produktu liečiť akékoľvek fyzické, kožné alebo duševné problémy. V prípade akýchkoľvek zdravotných problémov si pred použitím produktu vyžiadajte radu kvalifikovaného zdravotníckeho odborníka.
- Spoločnosť nepreberá právnu zodpovednosť za nároky týkajúce sa bezpečnostných problémov spôsobených nesprávnym používaním produktu.

13. Kvalifikácia zariadenia

Bežné zariadenie (nie je chránené proti škodlivému vniknutiu vlhkosti).

14. Obmedzená záruka

Spoločnosť vám zaručuje, že regeneračná čiapka s LED terapiou bude bez závad v materiáloch a spracovaní po dobu jedného roka od dátumu kúpy pôvodným vlastníkom. Záruka nie je prenosná ani priraditeľná inej osobe. Produkt musí byť používaný spôsobom uvedeným v tejto používateľskej príručke a iba s poskytnutým napájacím káblom.

Distribútor:


UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
Františkánske námestie 3/A
080 01 Prešov

Kontakt:
0905 684 954
obchod@unizdrav.sk
www.unizdrav.sk