



# FreeStyle Libre 2


SYSTÉM OKAMŽITÉHO MONITOROVANIA GLUKÓZY

## Stručná referenčná príručka



## Prehľad nastavenia

Úplné pokyny a informácie o systéme nájdete v návode na obsluhu.

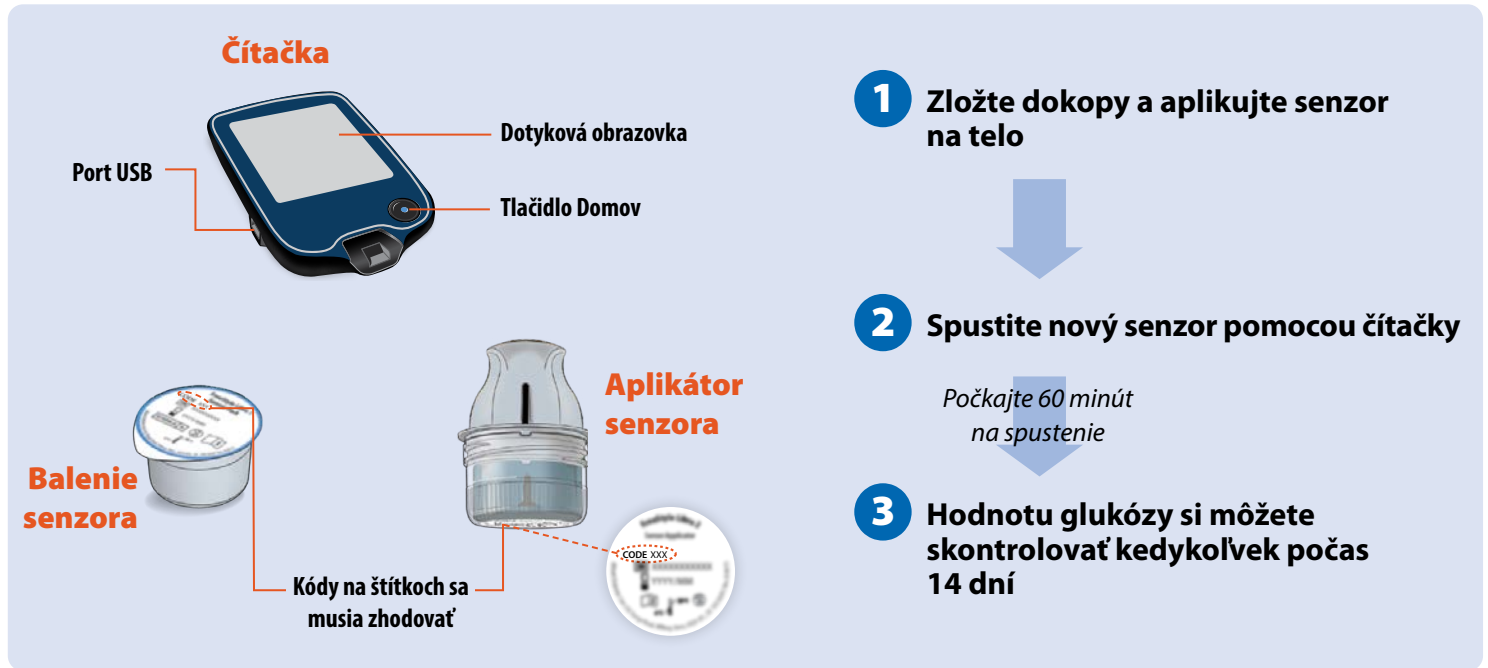

## 1 Zložte dokopy a aplikujte senzor na telo

### Pripravte sa

### KROK 1



Vyberte miesto na zadnej strane hornej časti ramena.


**Poznámka:** Vyhnite sa miestam s jazvami, znamienkami, striami, hrčkami a miestam vpichu inzulínu. Aby ste predišli podráždeniu kože, striedajte miesta medzi jednotlivými aplikáciami. Zohľadnite svoje pohodlie a činnosti.

### KROK 2



Miesto umyte obyčajným mydlom, osušte a potom očistite utierkou napustenou alkoholom. Pred pokračovaním nechajte miesto vyschnúť.

### KROK 3

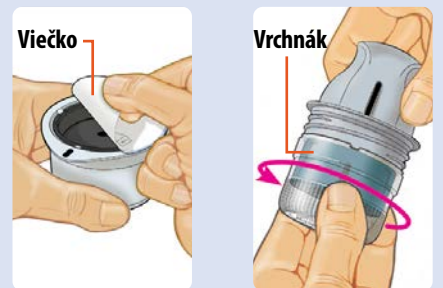

Úplne odlúpnite viečko na balení senzora. Odskrutkujte vrchnák z aplikátora senzora.

**UPOZORNENIE:** Kódy senzora sa musia zhodovať s kódmi na balení senzora a na aplikátore senzora.



### Pripravte aplikátor senzora

### KROK 4



Zarovnajte tmavú značku na aplikátore senzora s tmavou značkou na balení senzora. Na tvrdom povrchu pevne zatlačte na aplikátor senzora, kým nezastane.

### KROK 5



Vytiahnite aplikátor senzora z balenia senzora.

### KROK 6




Aplikátor senzora je pripravený na aplikáciu senzora.

**UPOZORNENIE:** Aplikátor senzora teraz obsahuje ihlu. Nedotýkajte sa vnútra aplikátora senzora ani ho nevkładajte späť do balenia senzora.

### Aplikujte senzor


### KROK 7

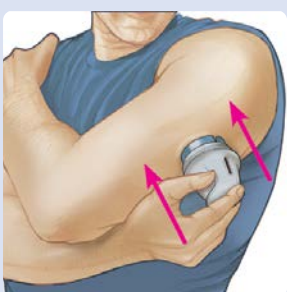

Umiestnite aplikátor senzora na miesto a pevne zatlačte, aby ste senzor aplikovali na telo.

**UPOZORNENIE:** Nepritláčajte aplikátor senzora, kým nebude umiestnený nad pripraveným miestom, aby ste predišli neželaným výsledkom alebo zraneniu.

### KROK 8

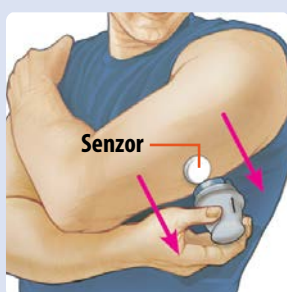

Pomaly odtiahnite aplikátor senzora od tela.

### KROK 9



Uistite sa, že senzor je upevnený. Použité balenie senzora a aplikátor senzora zlikvidujte. Pozrite časť *Likvidácia* v návode na obsluhu.



## 2 Spustite nový senzor pomocou čítačky


### KROK 1



Stlačením tlačidla Domov zapnete čítačku.

**Poznámka:** Ak používate čítačku prvýkrát, postupujte podľa výziev na nastavenie dátumu a času.

### KROK 2

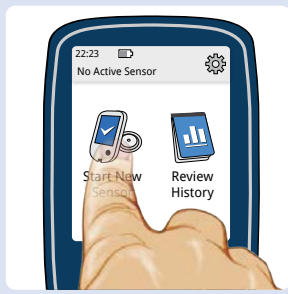


Ťuknite na možnosť **Start New Sensor** (Spustiť nový senzor).

### KROK 3



Podržte čítačku do 4 cm (1,5 palca) od senzora a naskenujte ho.

Senzor je možné použiť na kontrolu glukózy po 60 minútach.

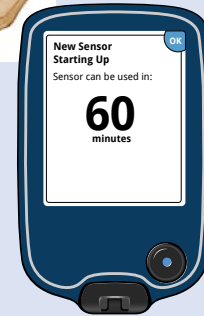

## 3 Skontrolujte svoju glukózu

### KROK 1



Stlačením tlačidla Domov zapnete čítačku.

### KROK 2




Podržte čítačku do 4 cm (1,5 palca) od senzora a naskenujte ho.

### KROK 3

**Hlásenie**  
Ťuknite a získajte ďalšie informácie

**Aktuálna glukóza**  
Hodnota glukózy z posledného skenovania

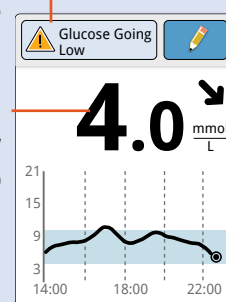


| Šípka trendu glukózy | Význam                         |
|----------------------|--------------------------------|
| ↑                    | Hodnota glukózy rýchlo stúpa   |
| ↗                    | Hodnota glukózy stúpa          |
| →                    | Hodnota glukózy sa pomaly mení |
| ↘                    | Hodnota glukózy klesá          |
| ↓                    | Hodnota glukózy rýchlo klesá   |

Čítačka zobrazuje vašu hodnotu glykémie. Patrí sem aktuálna glukóza, šípka trendu glukózy a graf glykémie.

## Nastavenie signalizácie


Senzor automaticky komunikuje s čítačkou a ak ju nastavíte na možnosť **ON** (Zapnutá), môže vám poskytnúť upozornenia na prítomnosť glukózy. Signalizácia je predvolene nastavená na možnosť **OFF** (Vypnutá). Ak chcete signalizáciu prepnúť na možnosť **ON** (Zapnutá) alebo zmeniť jej nastavenia, postupujte podľa týchto krokov.

### KROK 1

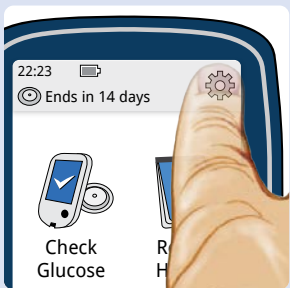


Opätovným stlačením tlačidla Domov prejdite na domovskú obrazovku. Dotknite sa položky

### KROK 2

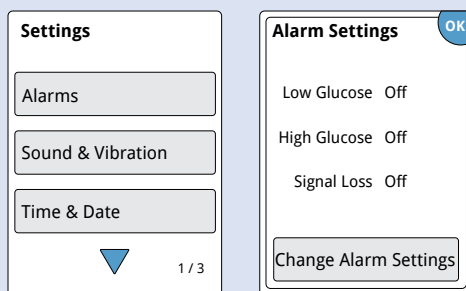

Dotknite sa položky **Alarms** (Signalizácia), a potom sa dotknite položky **Change Alarm Settings** (Zmeniť nastavenia signalizácie).

### KROK 3

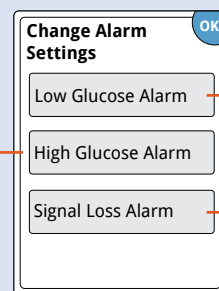

Upozorní vás, keď je hladina glukózy nad vami nastavenou hladinou.

Upozorní vás, keď je hladina glukózy nižšia, ako ste nastavili.



Upozorní vás, keď senzor nekomunikuje s čítačkou, a na to, že nedostávate alarm nízkej alebo vysokej glukózy.

Vyberte a nastavte signalizáciu. Ťuknutím na **done** (hotovo) možnosť uložíte.


**Poznámka:** Pri prvom zapnutí alarmu nízkej alebo vysokej glukózy sa automaticky zapne aj alarm straty signálu. Ťuknutím na pokočku **Signal Loss Alarm** (Alarm straty signálu) ju vypnete.

## Používanie signalizácie

Musíte naskenovať senzor, aby ste videli hodnotu glykémie.

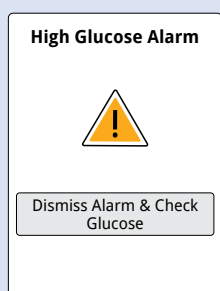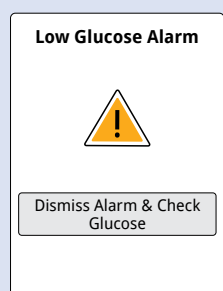


Dotknite sa položky **Dismiss Alarm & Check Glucose** (Zrušiť signalizáciu a skontrolovať glukózu) alebo stlačte tlačidlo Domov, čím vypnete signalizáciu a môžete skontrolovať glukózu.

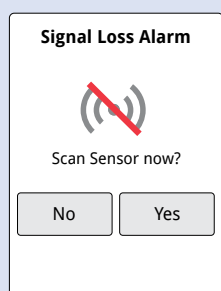

Stlačte tlačidlo **No** (Nie) pre vypnutie signalizácie.

Dotknite sa tlačidla **Yes** (Áno) alebo stlačte tlačidlo Domov pre vypnutie signalizácie a naskenovanie senzora.

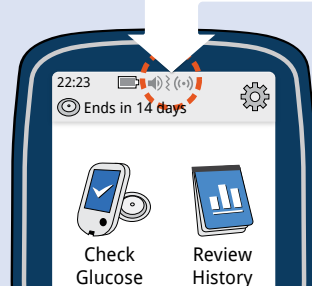

Keď je alarm **zapnutý**, na domovskej obrazovke sa zobrazí zvuk/vibrácie a stav signálu.

| Symbol | Význam                         |
|--------|--------------------------------|
|        | Zvuk a vibrácie <b>zapnuté</b> |
|        | Zvuk a vibrácie <b>vypnuté</b> |
|        | Senzor komunikuje s čítačkou   |
|        | Senzor nekomunikuje s čítačkou |

Ďalšie symboly nájdete v návode na obsluhu.

Ak ste postupovali podľa pokynov opísaných v návode na obsluhu a stále máte ťažkosti s nastavením systému alebo ak sa u vás objavujú príznaky, ktoré nie sú v súlade s meraním hodnôt glukózy, obráťte sa na zdravotníka.

FreeStyle, Libre, and related brand marks are marks of Abbott.  
©2019-2022 Abbott ART41106-031 Rev. A 10/22

EC REP

Abbott B.V.  
Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp,  
The Netherlands

i

CE

2797

Abbott Diabetes Care Ltd.  
Range Road  
Witney Oxon  
OX29 0YL, UK

Abbott